


POWERLITE | PEELER 2.0

ULTRASONIC IONIZER

3 MASKINER I 1

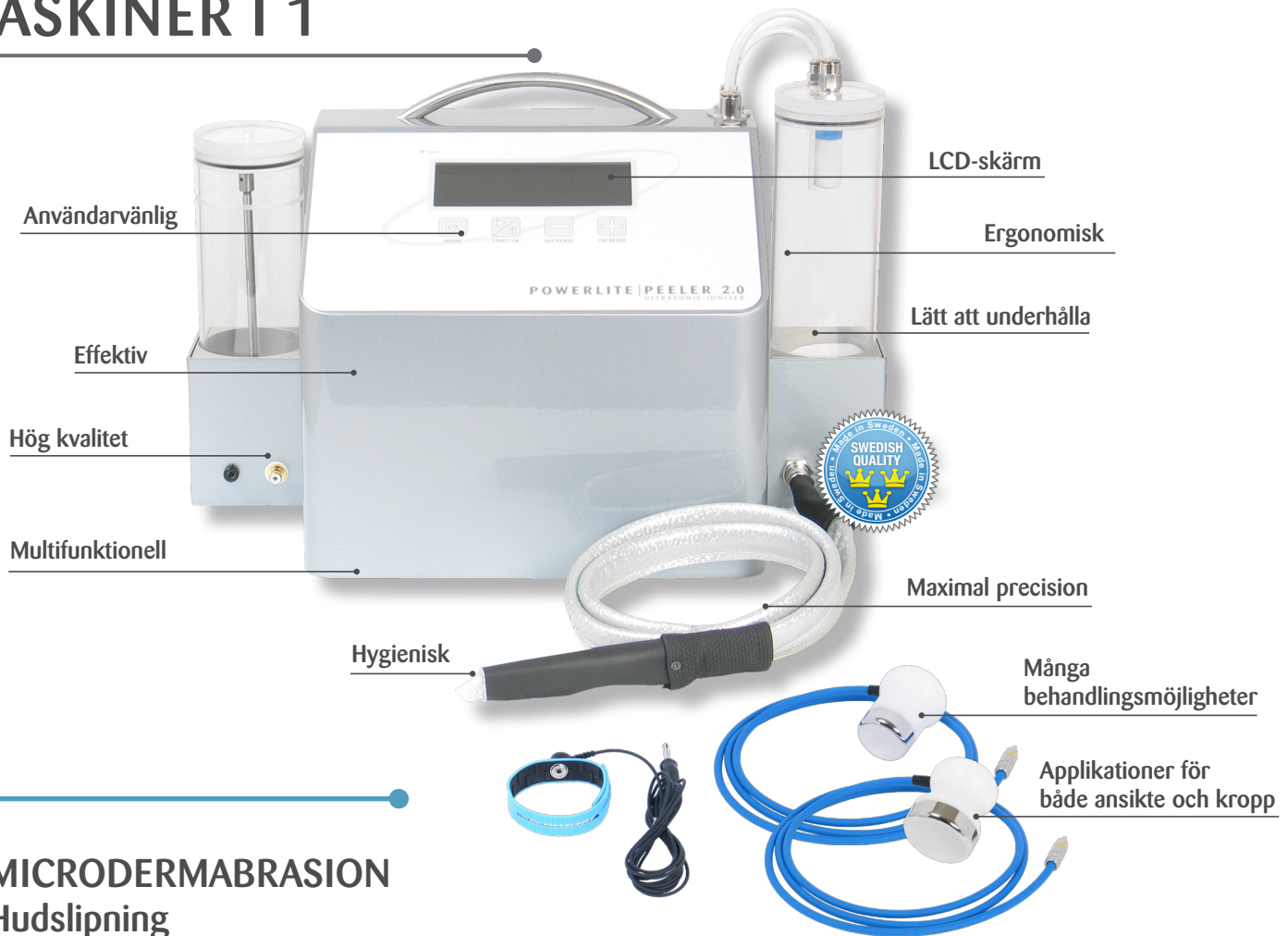

MICRODERMABRASION
Hudslipning



IONIZER-
Nedslussning



IONIZER+
Djuprengöring



ULTRASOUND
Uppstramning

INNOVATION FÖR PERFEKTION

Powerlite Peeler 2.0 är en kompakt, multifunktionell maskin med microdermabrasion, ultraljud och ionizer. Detta gör det möjligt att erbjuda en rad olika kombinationsbehandlingar för optimala resultat.

Behandlingsområden;

- Djuprengöring
- Hudslipning
- Effektiv penetration av aktiva ingredienser
- Uppstramning av slapp hud
- Muskelavslappning/mikromassage

Behandlingarna kan utföras både i ansiktet och på kroppen och passar män och kvinnor.

POWERLITE PEELER 2.0 ÄR SVENSKTILLVERKAD.





POWERLITE | PEELER 2.0

ULTRASONIC IONIZER

MULTIMASKINEN FÖR TOTAL SKÖNHET

➔ Erbjud dina kunder något nytt.

Med Powerlite Peeler 2.0 kan du utföra nya, mer effektiva och lönsamma behandlingar. Snabb, säker, hygienisk och resultaten syns omgående. Skräddarsy behandlingar för både ansikte och kropp efter kundens behov och önskemål. Maskinen är enkel att använda och ger snabba resultat.

TEKNISK SPECIFIKATION	
Färg:	Silver
Storlek (HxBxD):	340x480x220 mm
Vikt:	12 kg
Nätspänning:	220-240 Volt
Strömförbrukning:	Max 90 VA
 MICRODERMABRASION	
Pumptryck:	0 till -500 hPa (mbar) Elektroniskt reglerat vakuumtryck
Nivå:	0-10 Steg
 ULTRALJUD	
Frekvens kropp:	1 MHz Kontinuerlig
Frekvens ansikte:	1 MHz Pulserande
Behandlingsyta (diameter):	Ansikte 42 mm Kropp 56 mm
Nivå:	0-10 Steg
 IONIZER 	
Spänning:	0-10V
Ström:	3 mA
Frekvens:	60 Hz
Polaritet:	Valbar + eller -
Nivå:	0-10 Steg

➔ Service och Support

Du får tillgång till full service och support vad gäller behandlingsfrågor, marknadsföring och teknisk service. Startpaket ingår och innehåller allt du behöver för att komma igång med behandlingarna och marknadsföra salongen/kliniken.




INNOVATION FÖR PERFEKTION

SVENSK KVALITET


Powerlite Peeler 2.0 är svensktillverkad. Utveckling har skett i nära samarbete med svenska och japanska ingenjörer och läkare.



CE-MÄRKET

 CE-märkningen visar att kraven på säkerhet, hälsa och miljö uppfyllts och att föreskriven procedur följts för alla berörda direktiv.

ISO 13485:2003

 PreSwede AB är certifierade enligt ISO 13485:2003 Medicinsk Kvalitet Standard av Norske Veritas. Det innebär att företaget arbetar efter fastlagda, överenskomna och dokumenterade rutiner i allt som kan påverka kvaliteten hos produkter och tjänster.