

POWERLITE | 600[®]

PATENTERAD TEKNOLOGI FÖR SÄKRA OCH EFFEKTIVA BEHANDLINGAR.

Powerlite600[®] är ett av marknadens ledande och mest beprövade IPL-varumärken. Tekniken är väl testad, använder sig av selekterade och kontrollerade våglängder och nu även med ett unikt patent för optimal effekt.

Powerlite600[®]ED är känd för sin kraftfulla och effektiva hårborttagning, framgångsrika behandlingar av ytliga kärl, pigmenteringar, åldersfläckar, fina linjer, acne och rosacea. Powerlite600[®]ED använder sig av IPL (Intensivt Pulserande Ljus).

Med dubbla handtag och stor spot size får du effektiva och snabba behandlingar.

Det unika inbyggda filtret släpper endast igenom selekterade våglängder och har en livslängd på 20.000 pulser. Handtagen är ergonomiskt utformade och maskinen har en användarvänlig touch screen i färg.

Powerlite600[®]ED's unika vattenkylning samt att vi vid behandlingen använder Cool & Protect Gel tillåter oss att kunna ha hög effekt utan biverkningar.




Controlled Multi-Pulse Technology

→ PATENTERAD TEKNOLOGI

Powerlite600[®] har ett patenterat kontrollerat multipulssystem med upp till 15 mikropulser per flash. Detta ger önskad värme i målområdet (ca 70°) medan omgivande hud hålls sval (ca 40°). Denna unika reglering av pulssystemet gör att du kan använda hög effekt och samtidigt arbeta säkert och kontrollerat med minimala risker.

Controlled Multi-Pulse Technology innebär samma effekt under hela flashen, och lika stark effekt vid varje ljuspuls.

Det innebär säkra och effektiva behandlingar som ger resultat.

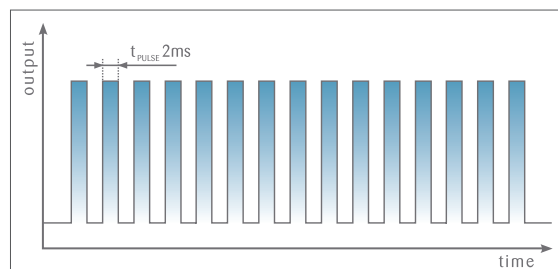

Powerlite600[®] har ett unikt kontrollerat multipulssystem med upp till 15 mikropulser per flash. Detta unika pulssystem är patenterat.

POWERLITE600[®] ÄR SVENSKTILLVERKAD.



POWERLITE | 600[®]

TEKNISK SPECIFIKATION	
Färg:	Maskin: Blå metallic Bottenplatta: Svart
Storlek Maskin (HxBxD):	1300 x 230 x 410 mm
Storlek Bottenplatta (HxB):	420 x 410 mm
Vikt:	75 kg
Lampkälla:	Xenon lampa
Våglängd:	600 - 950 nm (Hårborttagning) 540 - 950 nm (Hudförbättring) 425 - 480 nm (Acne)
Puls längd:	2 - 60 ms
Energi:	Hårborttagning 10 x 55 mm: 32J/cm ² , max 176J Hudförbättring 10 x 35 mm: 35J/cm ² , max 122,5J Acne 10 x 35 mm: 13J/cm ² , max 45,5J
Spot size:	Hårborttagning: 10 x 55 mm Hudförbättring: 10 x 35 mm Acne: 10 x 35 mm
Pulsintervall:	från 0,5 sek.
Volt:	230V/15A
Skärm:	LCD Touch Screen i färg

MÅNGFALD AV BEHANDLINGAR



Hårborttagning
10 x 55 mm



Hudförbättring
Pigmenteringar
Solskadad hud
Ytliga blodkärl
10 x 35 mm



Acne [tillval]
10 x 35 mm

TYDLIGA RESULTAT



Armhåla före




Efter 3 behandlingar



Pigmentering före




Efter 1 behandling

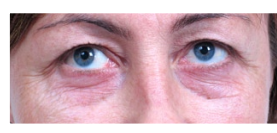

Rynkor före



Efter 3 behandlingar

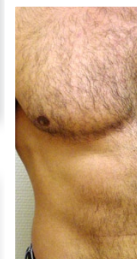

Bröst före



Efter 4 behandlingar

➔ Service och Support

Du får tillgång till full service och support vad gäller behandlingsfrågor, marknadsföring och teknisk service. Startpaketet ingår och innehåller allt du behöver för att komma igång med behandlingarna och marknadsföra salongen/kliniken.

CERTIFIERAD & GODKÄND TEKNIK

SVENSK KVALITET



Powerlite600[®] är svensktillverkad. Utveckling har skett i nära samarbete med svenska och japanska ingenjörer och läkare.

MEDICINSKT CERTIFIERAD



Certifieringen innebär att Powerlite600[®] är säker att använda, är effektiv och ger resultat samt är Medicinskt CE-godkänd.

CE-MÄRKT



CE-märkt av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). CE-märkningen visar att kraven på säkerhet, hälsa och miljö uppfyllts och att föreskriven procedur följts för alla berörda direktiv.

FDA-GODKÄND



FDA-godkänd i USA och Korea. Det innebär att Powerlite600[®] uppfyller FDAs hårda krav och kriterier och är godkänd att säljas i USA.

ISO 13485:2003



PreSwede AB är certifierade enligt ISO 13485:2003 Medicinsk Kvalitet Standard av Norske Veritas. Det innebär att företaget arbetar efter fastlagda, överenskomna och dokumenterade rutiner i allt som kan påverka kvaliteten hos produkter och tjänster.